




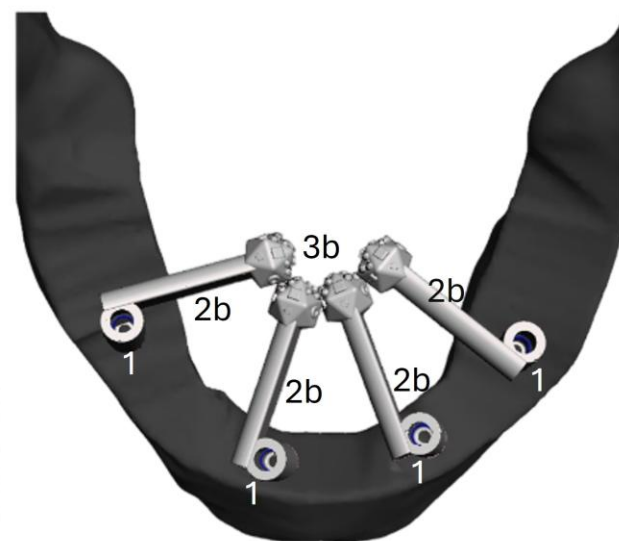




Linee Guida all'utilizzo per l'odontotecnico

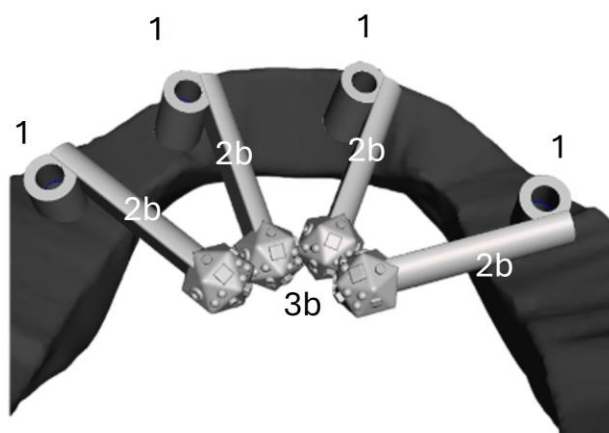


INTRAORALI

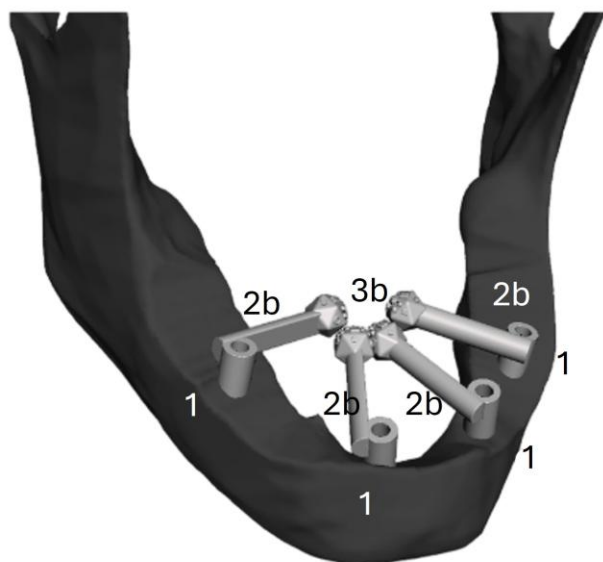

EXTRAORALI

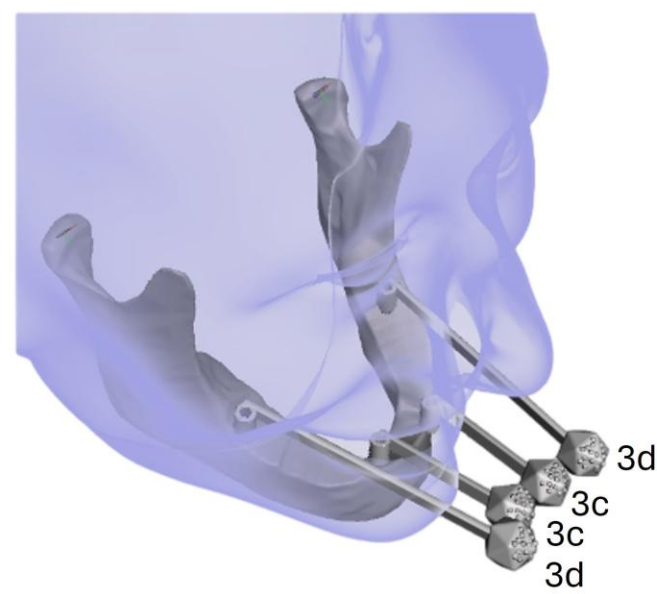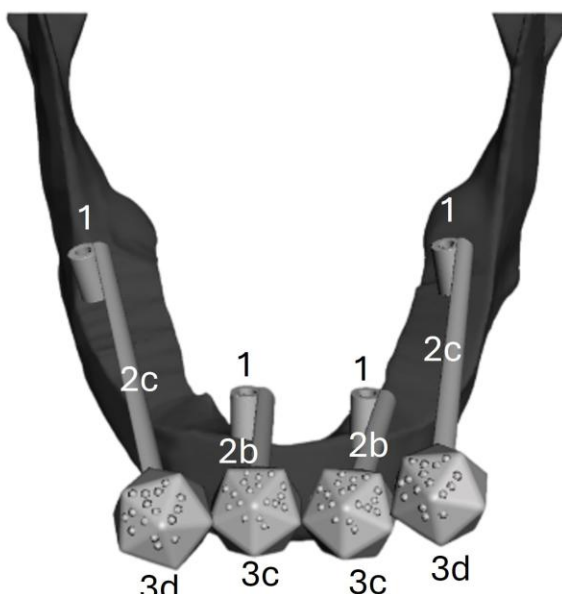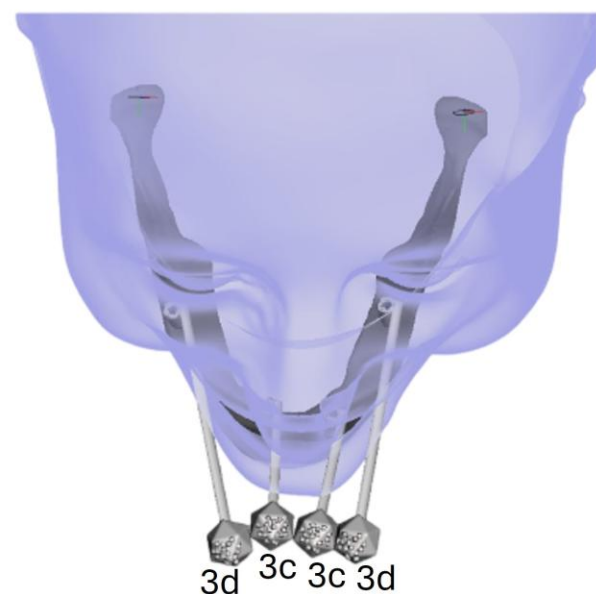

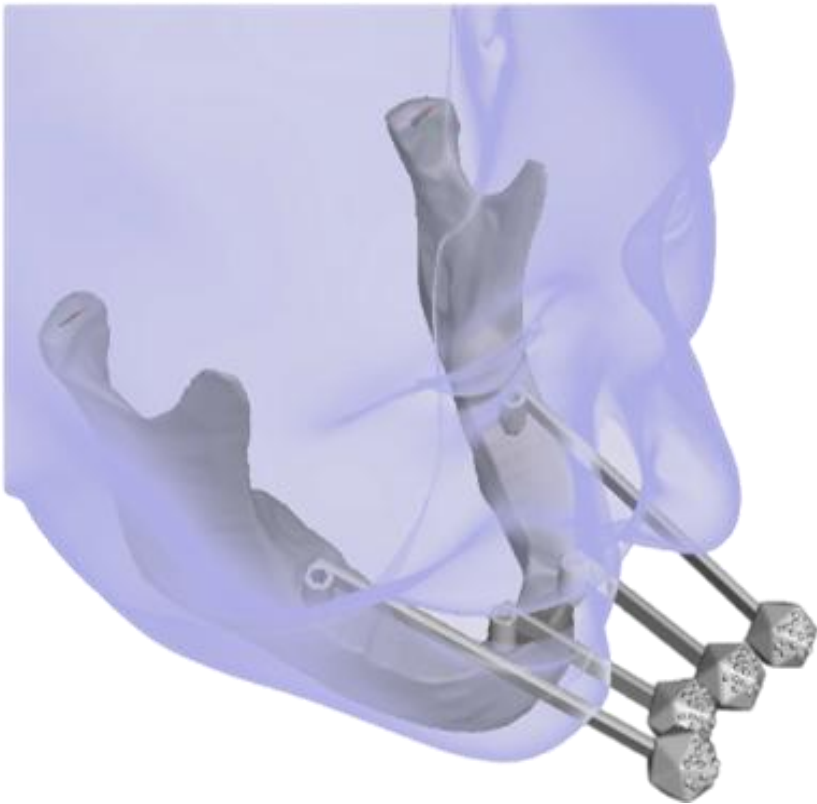

Non si sovrappongono alla lingua

Permettono una scansione asciutta e pulita

Indicati anche per Impianti in regione molto posterior (es: tuber-pterigo)


Kit GeoXact **intraorale**

Intraorale 2 cm	x6	
Intraorale 4 cm	x4	
Cappucci BT4 Slim	x6	
Screwdriver 1.2/15	x1	
Vite ritenzione 1.2	x10	


Kit GeoXact® **extraorale**

Extraorale 8 cm	x2	
Extraorale 4 cm	x6	
Cappucci BT4 Slim	x6	
Screwdriver 1.2/20	x1	
Vite ritenzione 1.2	x10	
Extraorale Pterygo	x2	

Al laboratorio verranno forniti per
l'accoppiamento:

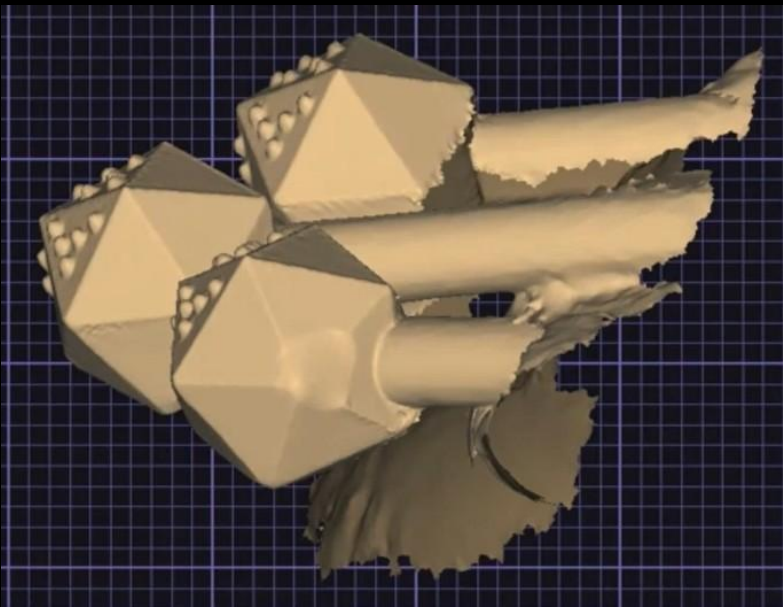

Scansione GeoXact

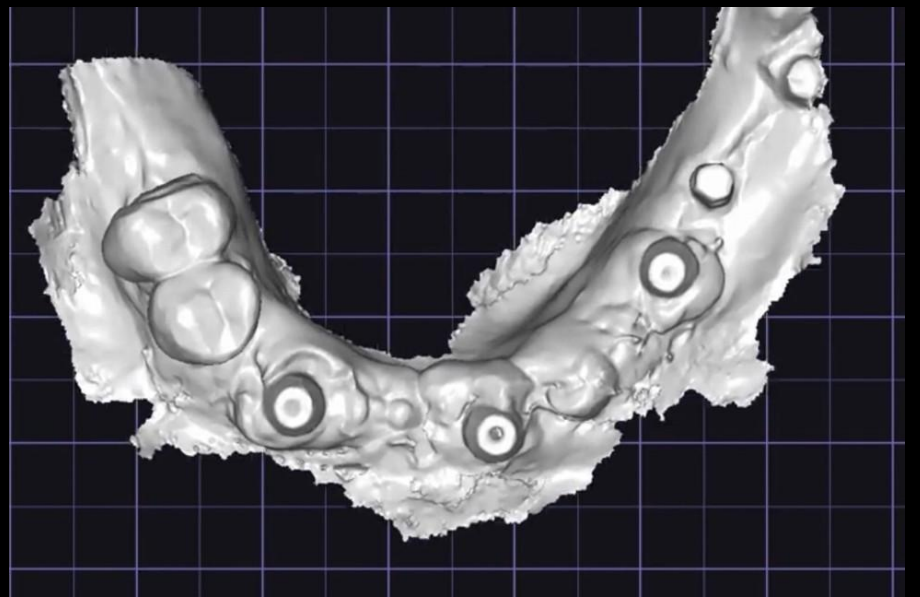


Scansione tessuti molli
con copri-mua
(sincronizzatori)

1



ANTAGONISTA

2

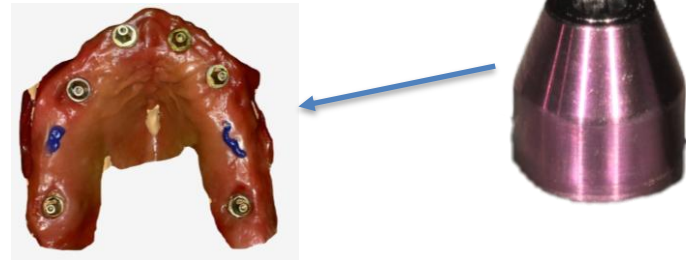

SINCRONIZZATORI

STEP OPERATIVI




SCANSIONE FACCIALE with GeoXact®

3



GeoXact®

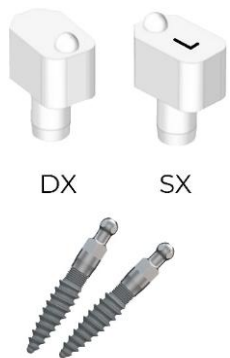


A


B
[Ruggiero et al]

C


La **relazione intermascellare** erroneamente detta dimensione verticale è a scelta dell'operatore. Si suggerisce l'uso degli SCANSKE (A) o miniscrew ortodontiche (B) o la dentiera (C)

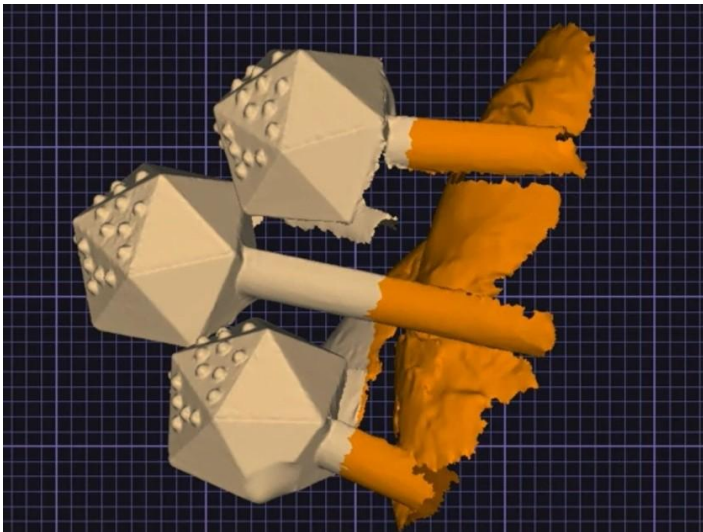


1. IMPORTA LA SCAN CON I
GEOXACT E TOGLIERE GLI
ECESSI

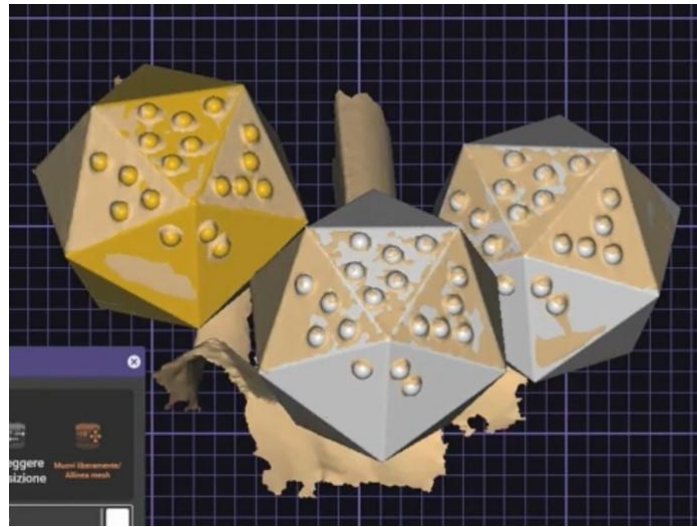


2. ALLINEARE IL GEOXACT
CORRISPONDENTE DALLA LIBRERIA
- *PRIMA ALLINEAMENTO MANUALE*
(ES. PER PUNTI) E POI BEST-FIT

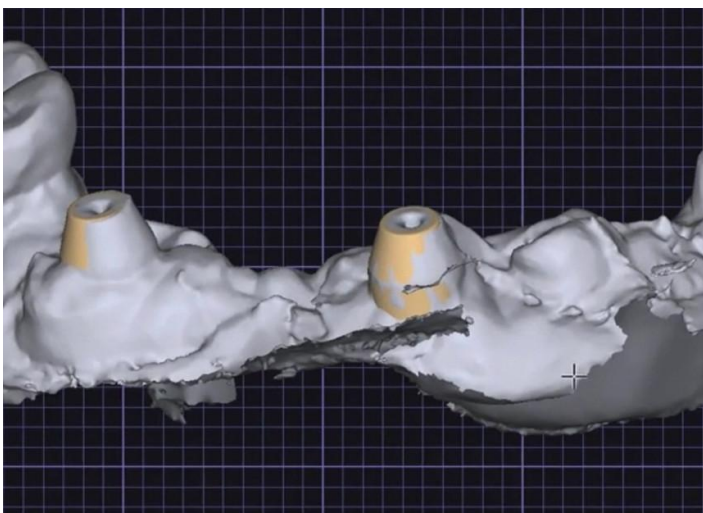

3. IMPORTA LA SCANSIONE CON I
COPRI-MUA E I TESSUTI MOLLI E
ALLINEARE I **COPRI-MUA** OTTENUTI
DA **GEOXACT** A **QUELLI DEI TESSUTI**
MOLLI

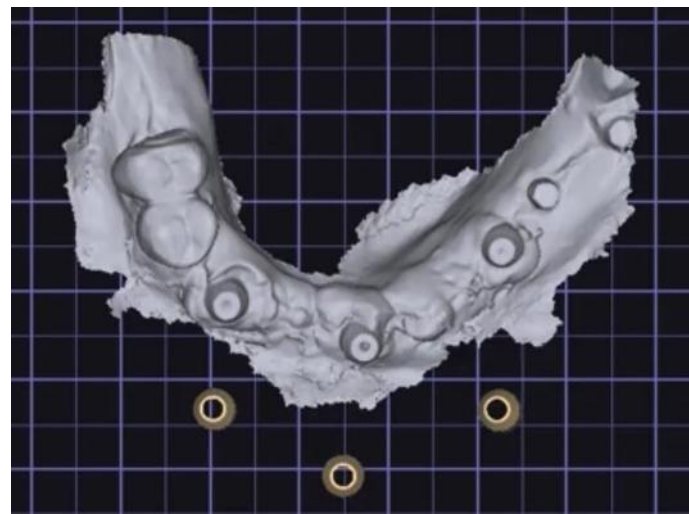



4. RIMUOVERE LE TESTE DEI
GEOXACT (FACOLTATIVO)

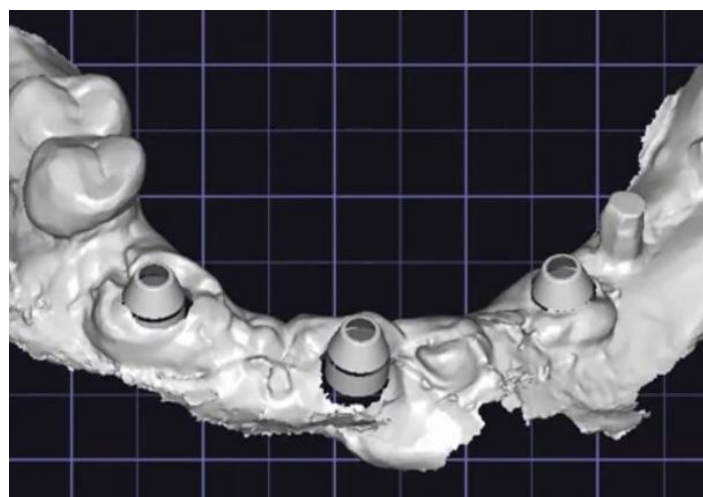

5. ELIMINARE I COPRI-MUA DEI TESSUTI
MOLLI



6. ESPORTARE IL NUOVO FILE CON I COPRI-
MUA DEI GEOXACT ACCOPPIATI AI TESSUTI
MOLLI

2. CREAZIONE DEL MODELLO

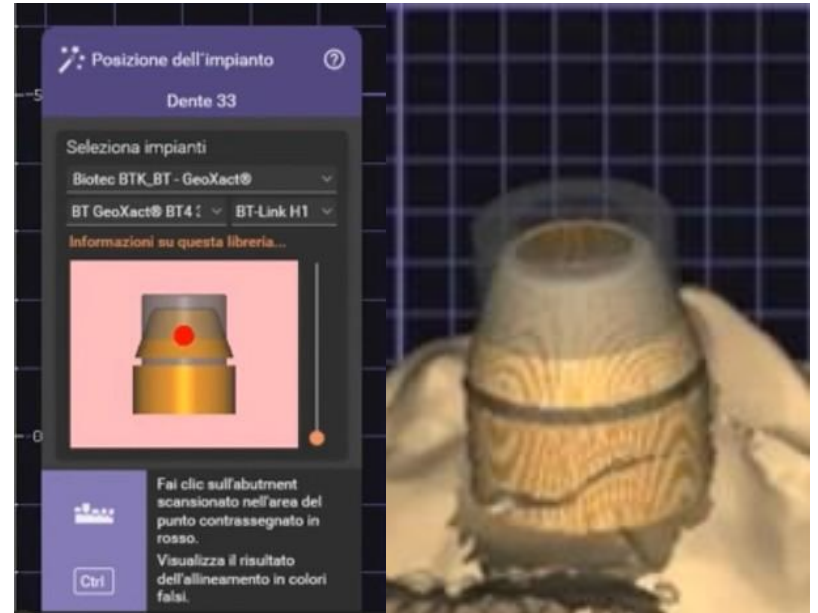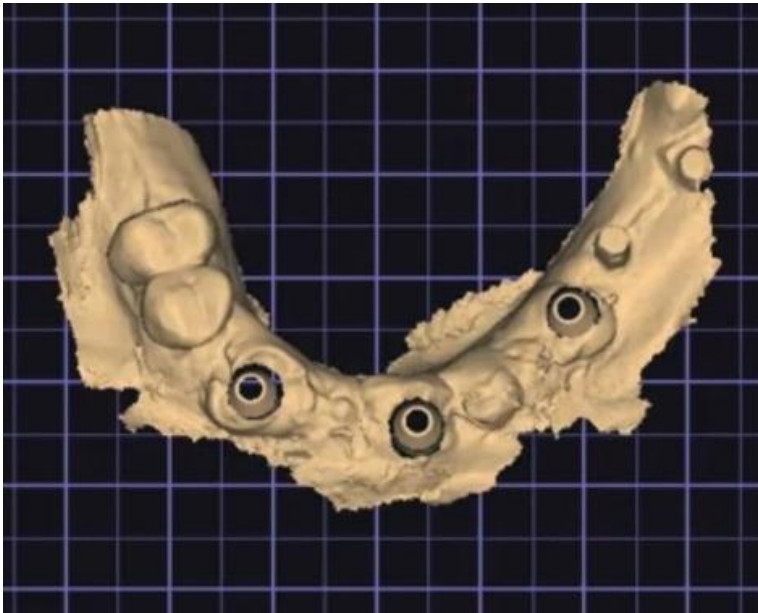

1. **IMPORTA** QUEST'ULTIMO **FILE** COME RIFERIMENTO PER LA CREAZIONE DEL MODELLO


2. **SELEZIONARE** DALLA LIBRERIA I **COPRI-MUA** (NON I GEOXACT) PER AVERE IL CORRISPONDENTE BOX-ANALOGO

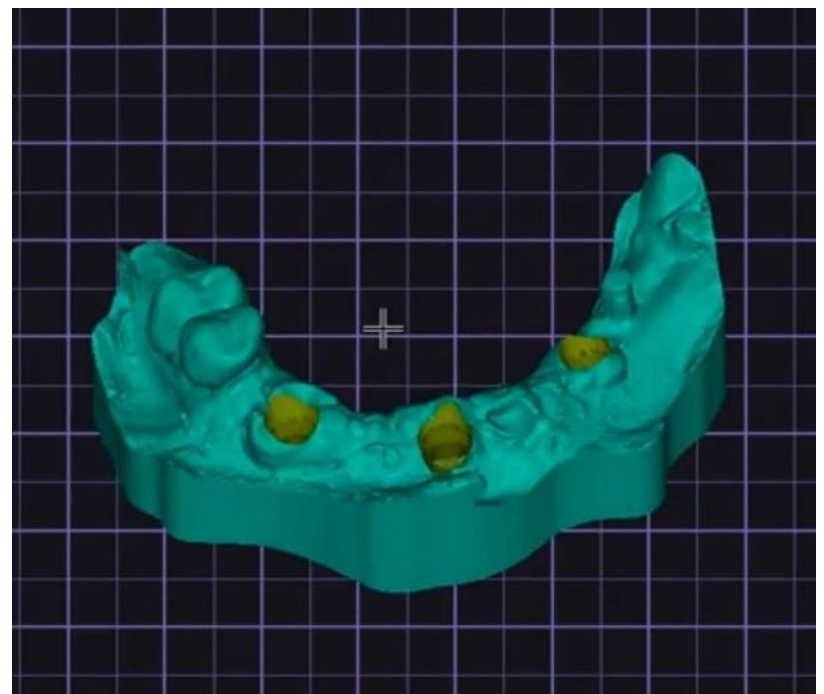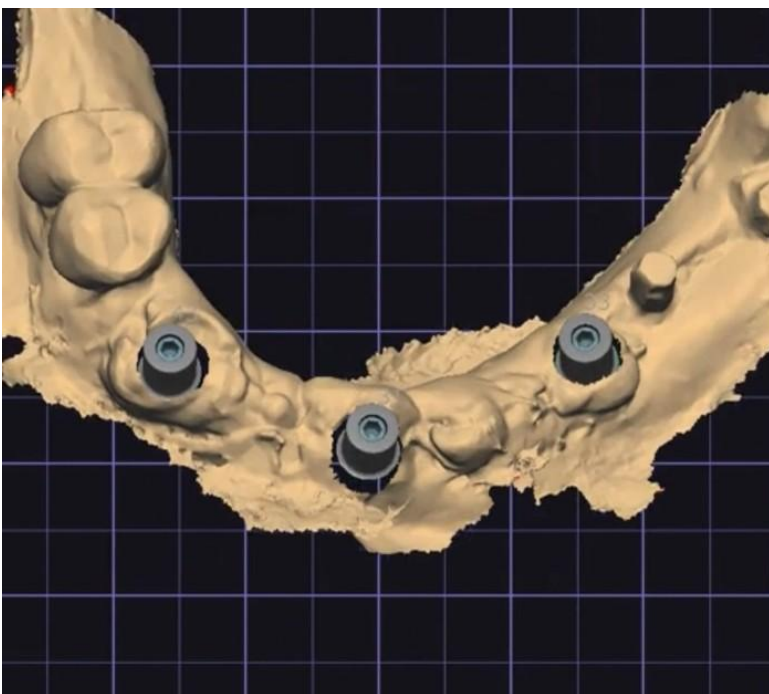

3. **ULTIMARE IL MODELLO**



ERRORI DA
NON
COMMETTERE

1. NON SELEZIONARE IL COPRI-MUA DURANTE LA CREAZIONE DEL MODELLO

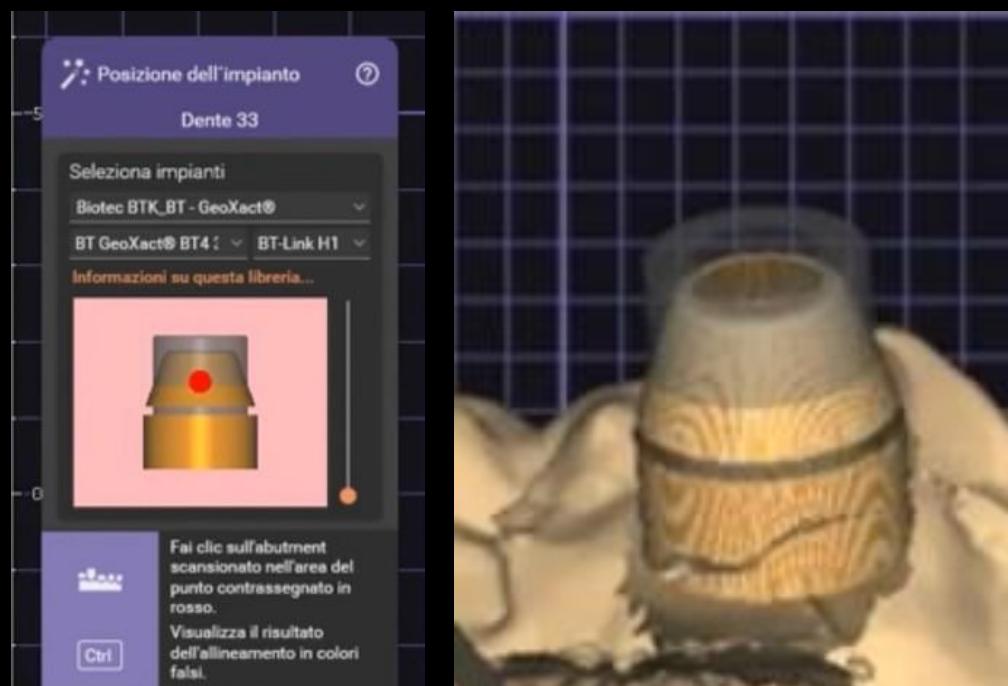

GeoXact va selezionato dalla libreria solo per avere i copri-mua nella **fase preliminare**. Invece, il copri-mua va selezionato nella fase di creazione del modello per avere la posizione del box dell'analogo.

2. NON PULIRE LA SCANSIONE

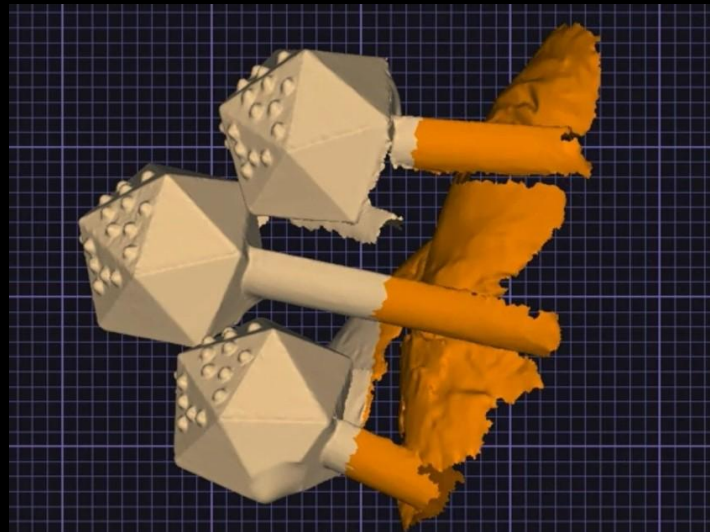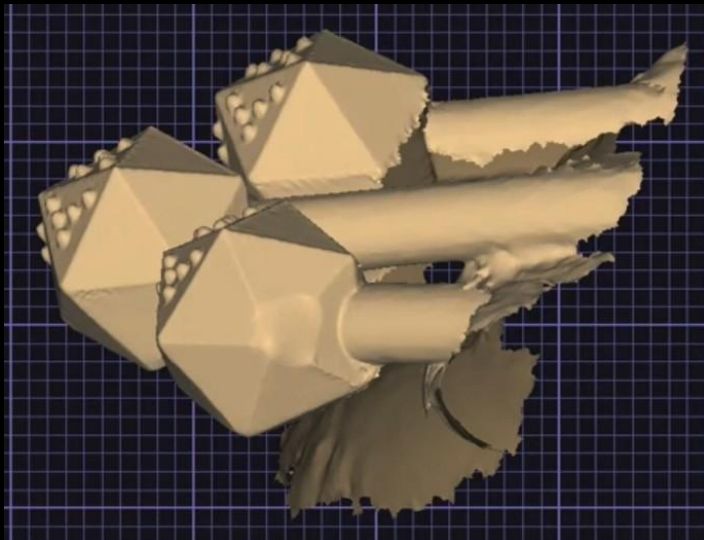

È sempre necessario **rimuovere gli eccessi** delle aree non riguardanti le teste di scansione, al fine di favorire un **corretto allineamento** tra la libreria e la testa dei GeoXact scansionati.
Effettuare sempre allineamento manuale e poi best-fit!